

Nešiojamasis prietaisas CILVARIS „La Beauté Secrète TQ-D27“

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prašome prieš naudojimą atidžiai perskaityti šią instrukciją.

Tyrimų ir plėtros įmonė: Tianjin Tianshi Biological Engineering Co., Ltd.

Adresas: No.20 Xinyuan Road, Wuqing Development Area, Tianjin 301700, China,
www.tiens.com

Gamintojas: Asia Pacific Perfect Technology Co.,Ltd

Adresas: Floor 1 west, No. 13, Daxing Road 1st, Buyong Industrial area, Shajing Road,
Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province


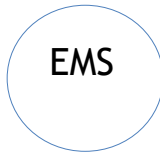


TURINYS

Gaminio aprašymas	3
Atsargumo priemonės	3
Gaminio apžvalga	4
Funkcijos	5
Naudojimo žingsniai	5
CV Ultragarsinis valymas	
Naudojimo režimai	6
RF režimas	7
EMS režimas	7
CV režimas	8
AUTO režimas	8
Gaminio parametrai	9

Gaminio pavadinimas

Nešiojamas prietaisas CILVARIS „La Beauté Secrète TQ-D27“

Gaminio aprašymas

Režimas	Funkcija ir efektas
	RF + LED nano raudona šviesa
	EMS + LED nano mėlyna šviesa
	C V ultragarsas
	Automatinis kombinuotas režimas Pradžioje RF+CV+ raudona šviesa 7,5 min. Vėliau EMS + mėlyna šviesa 7,5 min.

Atsargumo priemonės

- Pradėkite naudoti nuo žemesnio iki aukštesnio lygio
- Prietaisui sugedus, jokių būdu jo nenaudokite, nes tai gali sukelti neigiamą poveikį sveikatai.
- Nenaudokite, jei odoje yra bėrimų, uždegimų, niežėjimo ar kitų anomalijų.
- Žmonės, kuriems atliekamos dantų gydymo procedūros, turėtų būti atsargūs ir vengti tiesioginio kontakto su prietaisu.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis nukrito, sudužo ir buvo sugadintas.
- Nevalykite prietaiso tirpikliais, tokiais kaip alkoholis, skiediklis, benzinas ir nagų lakas. Tai darydami galite sugadinti prietaiso paviršių.
- Nenaudokite toje pačioje kūno vietoje ilgą laiką.
- Naudodami prietaisą atkreipkite dėmesį į odos būklę.
- Netinka: žmonėms, sergantiems alerginiu kontaktiniu dermatitu, odos ligomis, nėščioms moterims, moterų menstruacijų metu, žmonėms, kenčiantiems nuo paralyžiaus ar jutimo sutrikimų, pacientams, sergantiems kaulų ligomis ir kt.
- Laikykite prietaisą ir įkroviklį sausoje vietoje.
- Šis prietaisas nėra skirtas vaikams ir žmonėms, turintiems judėjimo sutrikimų, nebent jie būtų prižiūrimi siekiant užtikrinti jų saugumą.
- Vandens ir elektros kontaktas yra pavojingas. Taigi, nenaudokite belaidžio įkroviklio drėgnoje aplinkoje: vonios kambaryje ar baseine.
- Šį prietaisą reikia naudoti kartu su losjonu / kremu.
- Vaikams iki 14 metų negalima naudoti šio prietaiso.

DĒMESIO


* * * * Kad prietaiss nebūtu sugadintss, nenaudokite jo, jei turite žemiau išvardintu aparatu:

- Plaučiu ventiliavimo aparatu ar kitus i kūnā implantuojamus ičius
- Stimulatorius
- Elektrokardiografā ar kitus nešiojamuosius ičius
- Metaliniu detaliu kūne (pvz. plokšteliu, varžtu, kabių ir pan.)

* * * * Norėdami išvengti nelaimingu atsitikimu ar sužeidimu, nenaudokite prietaiso šiose kūno vietose:



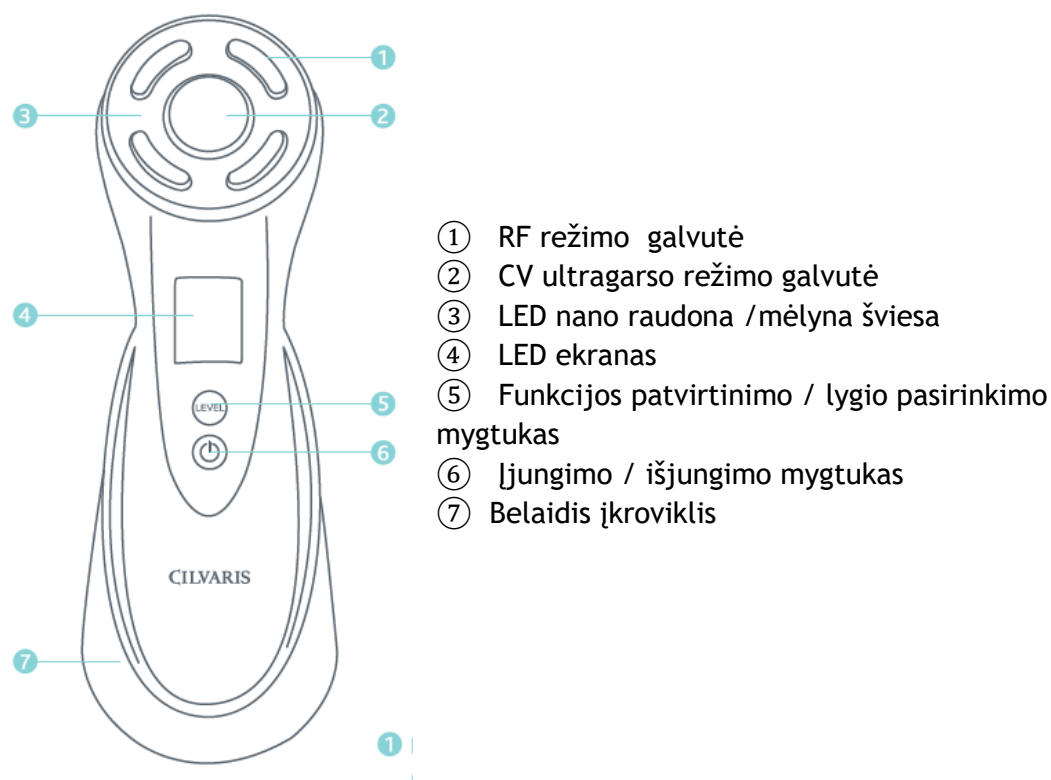


- Per petnešas
- Vietose, kuriose buvo atliktos estetinės chirurgijos operacijos
- Ant akių vokų, akių obuolių ir aplink akis esančios srityse
- Ant operacijų pjūvių, žaizdų
- Jei sergate infekcinėmis ir kitomis ligomis, prieš naudojimą pasitarkite su gydytoju.

Gaminio apžvalga



Funkcijos

Ekranas	Režimas / Lygis (Lygi koreguokite pagal savo pojūčius)					
RF	RF OFF	RF lygis 1	RF lygis 2	RF lygis 3	RF lygis 4	RF lygis 5
EMS	EMS OFF	EMS lygis 1	EMS lygis 2	EMS lygis 3	EMS lygis 4	EMS lygis 5
CV	CV OFF	CV - ON ON				
AUTO	AUTO OFF	AUTO - ON ON				

-  1. Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaisą.
-  2. Kai mirksi RF, paspauskite mygtuką  kad perjungtumėte į režimus: EMS, CV, AUTO.
-  3. Kai mirksi RF, paspauskite mygtuką LEVEL, kad patvirtintumėte šią režimą.
-  4. Patvirtinę režimą, paspauskite mygtuką LEVEL vieną kartą, kad pereitumėte į 1 lygį. Jei spausite du kartus, pereisite į 2 lygį, tris kartus - į 3 lygį, keturis kartus - į 4 lygį ir penkis kartus - į 5 lygį.


Naudojimo žingsniai

Įkrovimas (prieš naudojimą įsitikinkite, kad prietaisas yra pakankamai įkrautas)

- Padėkite prietaisą ant įkroviklio, įjunkite maitinimą ir pradėkite krauti. Prietaisas visiškai pasikrauna per maždaug 6 valandas.
- Rekomenduojama pirmą kartą krauti 6 valandas. Prietaiso viduje yra intelektualiai saugos kontrolė, todėl, kai prietaisas kraunasi, jis negali būti įjungtas naudojimui.

1-as žingsnis. Valymas


Nuvalykite makiažą valomąja priemone. Arba naudokite CV režimą veidui valyti. Įdėkite medvilninę kempinėlą taip, kaip parodyta, ir naudokite makiažo valiklį.

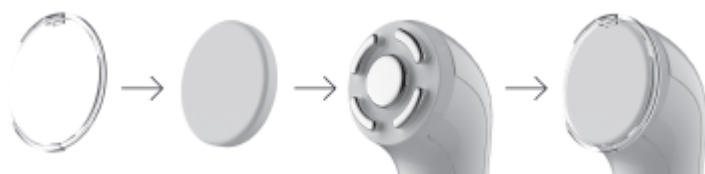

- Medvilninės kempinėlos tvirtinimo žiedas
- Medvilninė kempinėla
- Prietaiso galvutė
- Baigta

CV ultragarsinio valymo režimas

- ① Įdėkite kosmetinės vatos diskelį ant galvutės ir užfiksuokite tvirtinimo žiedu.
- ② Padenkite vatos diskelį makiažo valikliu ir įsitikinkite, kad jis yra drėgnas.
- ③ Įjunkite prietaisą. Pasirinkite CV režimą.
- ④ Įsitikinkite, kad galvutė gerai priglundusi prie veido odos. Masažuokite veidą prietaisu, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau nuo 1 iki 6 (tuos pačius judesius kartokite kairėje ir dešinėje veido pusėje). Kai vatos diskelis išsausės, prietaisas judės sunkiau. Tada pakartotinai padenkite vatos diskelį makiažo valikliu, kad jis būtų drėgnas.
- ⑤ Atlikę valymą nuimkite tvirtinimo žiedą ir vatos diskelį. Nuvalykite prietaiso galvutę švariu audiniu ir pereikite prie kitų žingsnių.

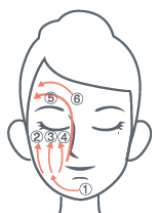

2-as žingsnis. Kremo, losjono ar kito gaminio naudojimas

Pagal režimą ir odos tipą pasirinkite tinkamą gaminį.

Nr.	Režimas	Funkcija	Kosmetikos gaminiai
1	RF	RF+ LED nano raudona šviesa	Esencija / emulsija / gelis
2	EMS	EMS +LED nano mėlyna šviesa	Gelis / emulsija / veido kremas / kaukė
3	CV	CV ultragarsas	Emulsija / kremas (valymo funkcija su makiažo valikliu)
4	AUTO	RF + CV + raudona šviesa 7,5 min. EMS + mėlyna šviesa 7,5 min.	Lengvos tekstūros gaminiai, kaukė, kt.

Pastaba: dėl skirtingų odos tipų, aukščiau pateikti nurodymai yra tik rekomendacinio pobūdžio.

3-ias žingsnis. Prietaiso įjungimas (naudojimo būdai)

Patarimas: pradėkite naudoti nuo žemesnio iki aukštesnio lygio

- ① Įjunkite prietaisą, įsitikinkite, kad jo galvutė priglundusi prie odos ir švelniai masažuokite.

Pastaba: naudojant RF režimą, prietaiso galvutė negali būti toje pačioje padėtyje ilgiau kaip 5 sek.

RF, EMS, CV režimai: priminimas kas 5 min., prietaisas automatiškai išsijungs po 15 min. masažo.

- ② Veido valymas: po masažo pašalinkite kremo likučius. Veidą nuvalykite rankšluosčiu arba vandeniu.

Prietaiso valymas: prietaisą galima nuplauti ir nusausinti švaria šluoste.

RF (radijo dažnio) režimas: naudokite nuo žemesnio iki aukštesnio lygio

Naudokite su šiais gaminiais: esencija / emulsija / geliu

- ① Masažuokite veidą prietaisu nuo kaktos vidurio į kairę ir į dešinę.



- ② Masažuokite veidą prietaisu nuo vidinio akių kampo išorinio akių kampo link.



- ③ Masažuokite veidą sukamaisiais judesiais nuo veido vidurio išorės link.



- ④ Masažuokite veidą iš apačios į viršų ir iš viršaus į apačią.



EMS (mikro srovės) režimas: naudokite nuo žemesnio iki aukštesnio lygio

Naudokite su šiais gaminiais: geliu / emulsija / lengvos tekstūros kremu / kauke

- ① Masažuokite veidą prietaisu nuo burnos apačios į viršų abiejose veido pusėse.



- ② Patepkite veidą kosmetikos priemone ir lengvai masažuokite veidą prietaisu.



CV (ultragarso) režimas

Naudokite su šiais gaminiais: emulsija / kremu (valymo režimas su makiažo valikliu)

- ① Masažuokite veidą prietaisu sukamaisiais judesiais nuo veido vidurio išorės link.



- ② Lengvai masažuokite veidą nuo nosies vidurinės veido dalies link abiejose veido pusėse.



AUTO (kombinuotas) režimas

RF + CV + raudona šviesa 7,5 min. Po to EMS + mėlyna šviesa 7,5 min.

- ① Masažuokite veidą prietaisu nuo kaklo vidurio išorės link. Jei norite sustiprinti kaklo masažo cirkuliaciją, masažuokite iš viršaus į apačią.



- ② Masažuokite veidą prietaisu nuo veido vidurio išorės link arba nuo išorės vidurio link.



- ③ Masažuokite pagal aukščiau nurodytus žingsnius.

Automatinis maitinimo IŠJUNGIMAS

Prietaisas automatiškai išsijungia po 15 minučių nuo įjungimo pradžios.

Jei norite tęsti prietaiso naudojimą, paspauskite ir ilgai palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką.

Prietaiso pyptelėjimas reiškia, kad jis buvo naudojamas daugiau nei 5 minutes kiekvienam režimui.

Atsparumas vandeniui

- Pagrindinio įrenginio atsparumas vandeniui yra lygus IPX6, todėl šį prietaisą galima valyti vandeniui, tačiau prieš tai įsitikinkite, kad jis yra išjungtas.
- Įkroviklio stovas nėra atsparus vandeniui
- Įprasta, kad įkrovimo metu prietaisas šiek tiek įkaista.

Gaminio parametrai

Pavadinimas: La Beauté Secrète Portable Apparat

Įtampa: 7.4 V

Srovė: 1000 mA

Galingumas: 7.4 W

Įkrovimo įtampa: 9.0 V

Įkrovimo srovės stiprumas: 1.0 A

Įkrovimo būdas: belaidis įkrovimas

Įkrovimo trukmė <6 val.

Naudojimo laikas: rekomenduojama naudoti 15 min. (maitinimas automatiškai išsijungs po 15 min. nuo prietaiso įjungimo)

* Prietaiso pyptelėjimas reiškia, kad jis buvo naudojamas daugiau nei 5 minutes kiekvienam režimui.

Naudojimo laikas <60 min. (vienai funkcijai)

Režimai: RF-----1MHZ (5 lygiai)

EMS-----5 (5 lygiai)

CV----- 5 MHz

LED----- raudona / mėlyna

Kitos funkcijos: LED ekranas